


**HEXAGON**

**ROTEIRO PARA INSTRUMENTAÇÃO DE HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL  
ACESSO ANTERÓGRADO**




## Punção Inicial e passagem do Fio Guia com Oliva

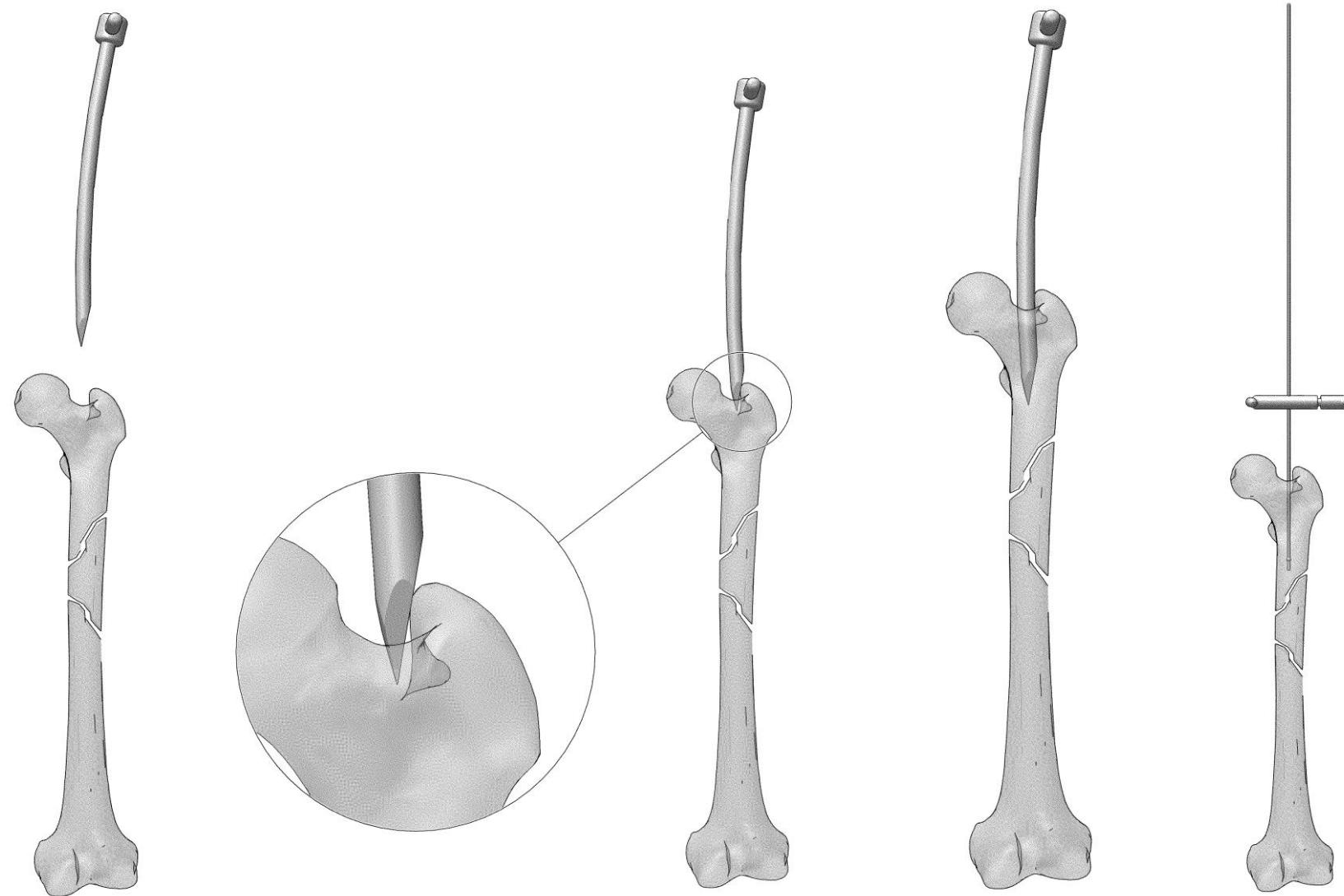

INICIADOR (1344) | EMPURRADOR PARA FIO (1428) | FIO GUIA Ø3x587mm | ALINHADOR PARA FIO (1342)




## Redução da fratura, passagem do Fio Guia com Oliva e Fresagem

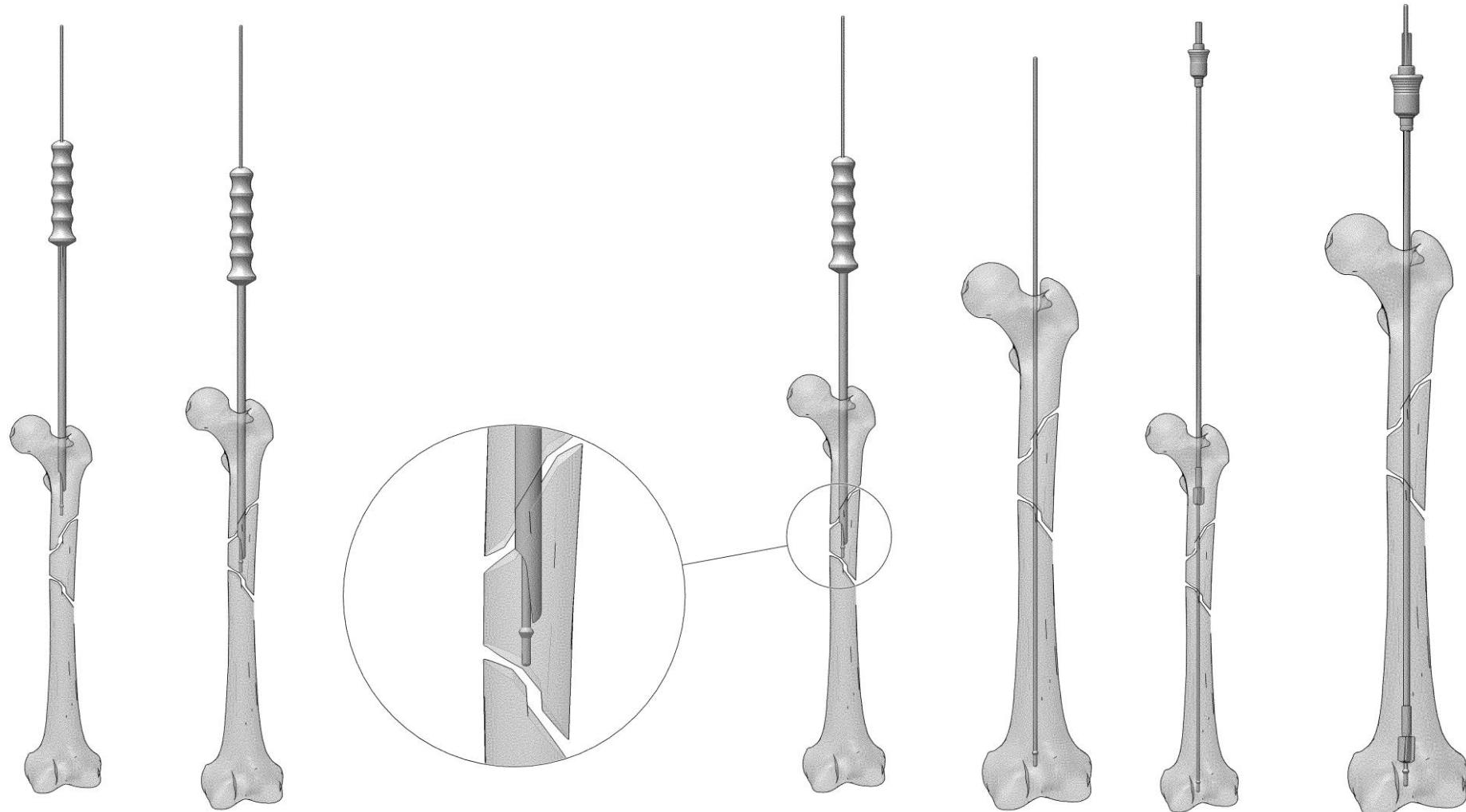

**FIO GUIA Ø3x587mm | ALINHADOR PARA FIO (1342) | PROTETOR DE PELE (1430) | FRESAS FLEXÍVEIS Ø9 à Ø14mm**




## Troca do Fio Guia com Oliva e Medição

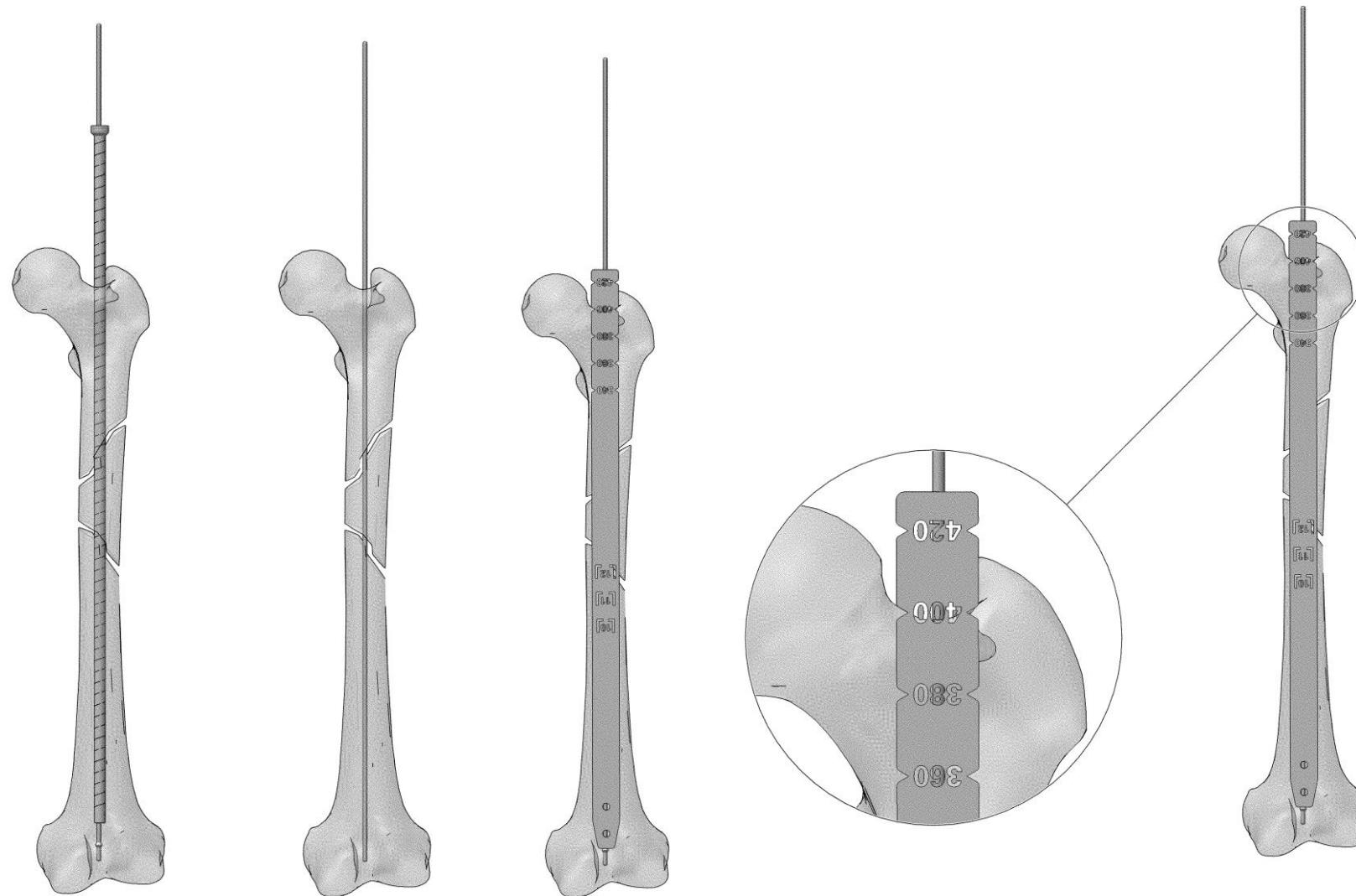

TROCADOR DE FIOS | FIO GUIA Ø2,5x587mm | RÉGUA (1444)




## Montagem do Guia e Introdução da Haste

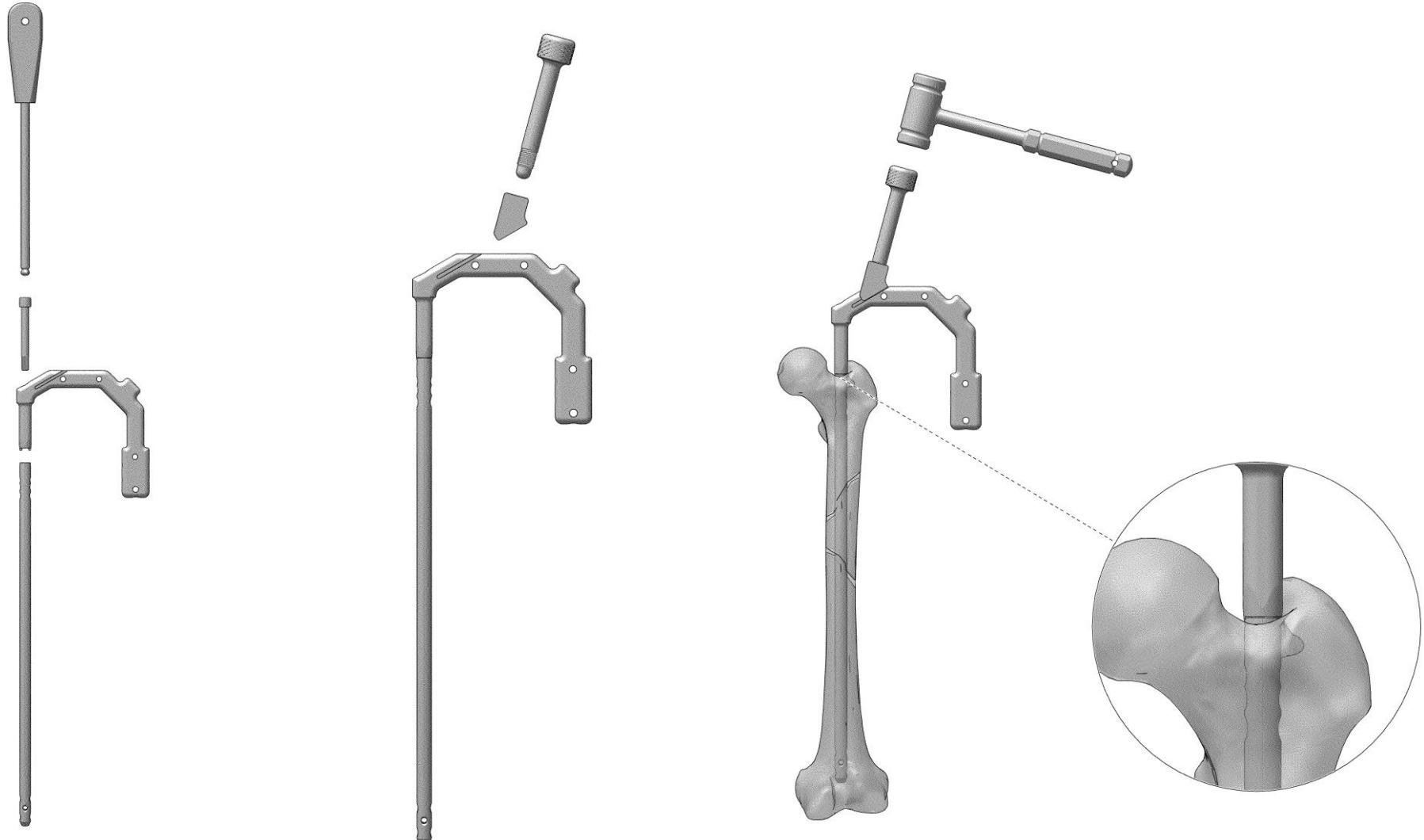

IMPACTOR PARA GUIA PROXIMAL (1321) | TRAVA PARA IMPACTOR (1302) | GUIA PARA HASTE (2930)  
PINO FIXAÇÃO M8 PARA GUIA/HASTE (1323) | CHAVE SW. 8mm (6166) | MARTELO (1425)




**Tomada de imagem (Perfil) do orifício Distal**

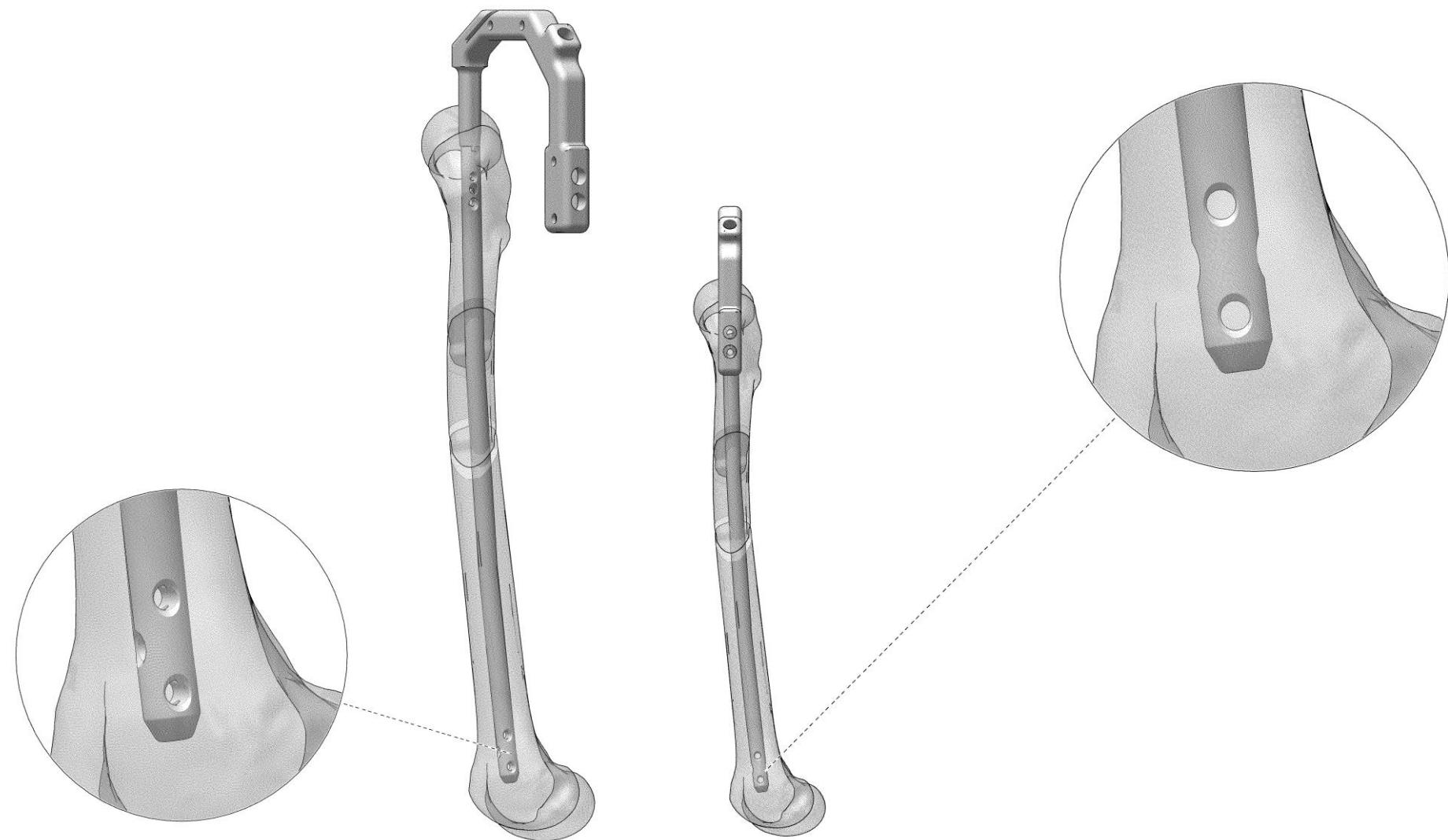




## Alinhamento e Perfuração Distal

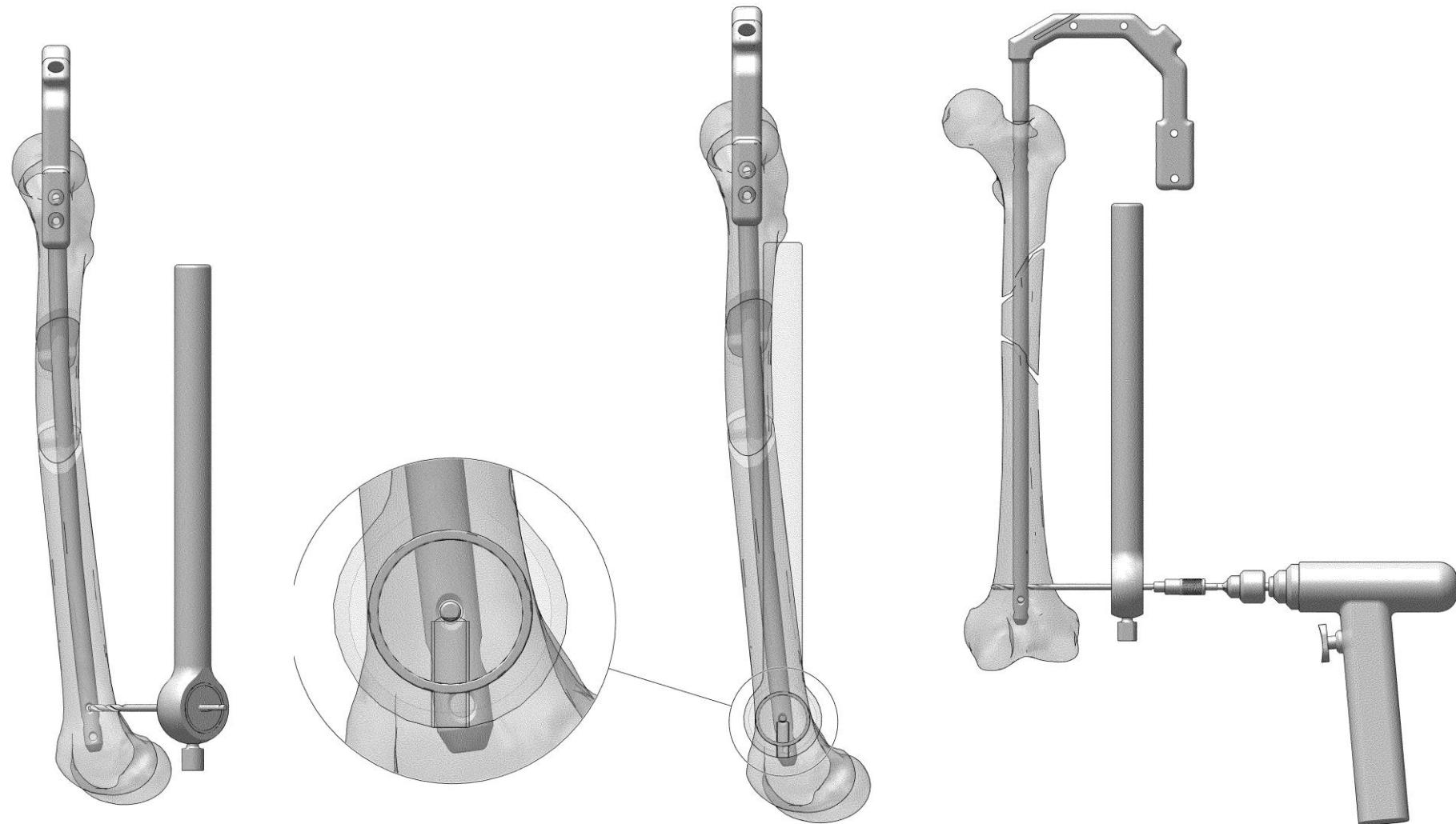

GUIA TRANSLÚCIDO (1341) | ENGATE PARA BROCA AO (90243) | BROCA Ø4,3x150mm AO




## Medição e Bloqueio Distal

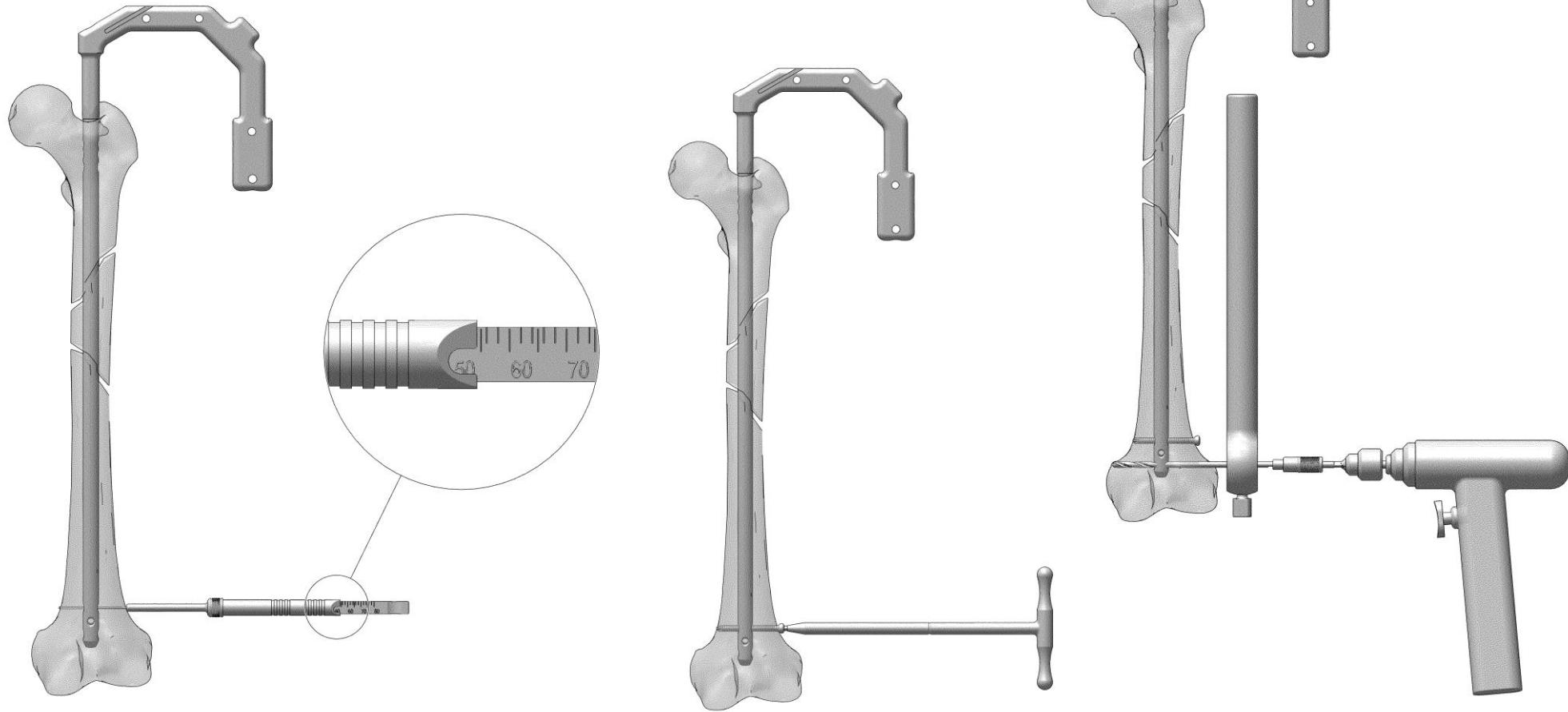

MEDIDOR PARA PARAFUSO (1345) | CHAVE HEXAGONAL PARA PARAFUSO 4,9mm (1312) | BROCA Ø4,3x150mm AO





## Bloqueios Distais

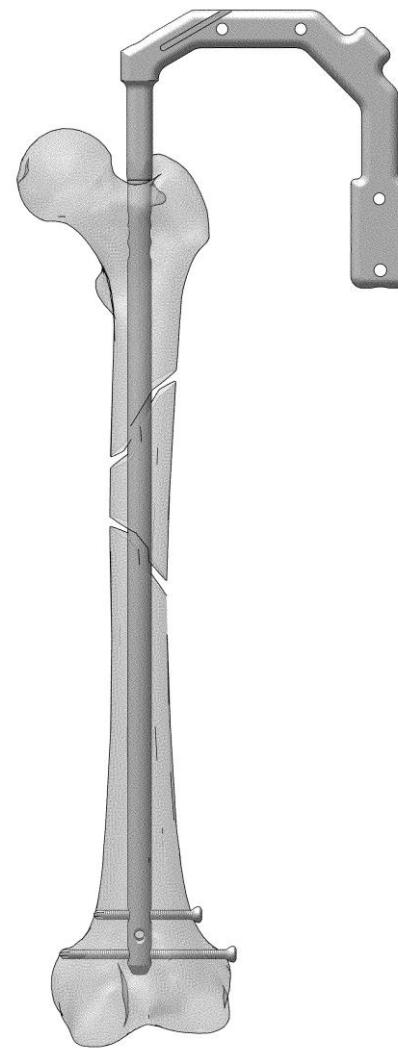

CHAVE HEXAGONAL PARA PARAFUSO Ø4,9mm (1312)





## Bloqueio proximal

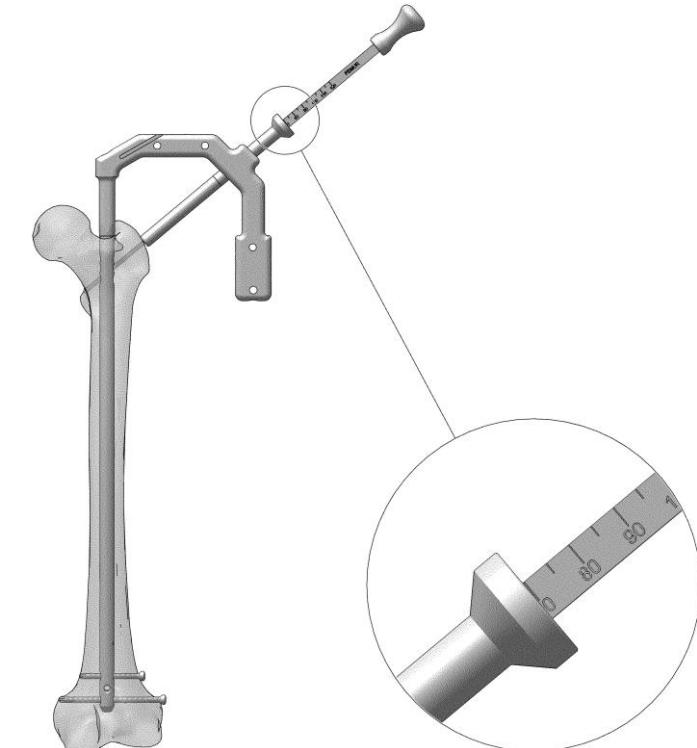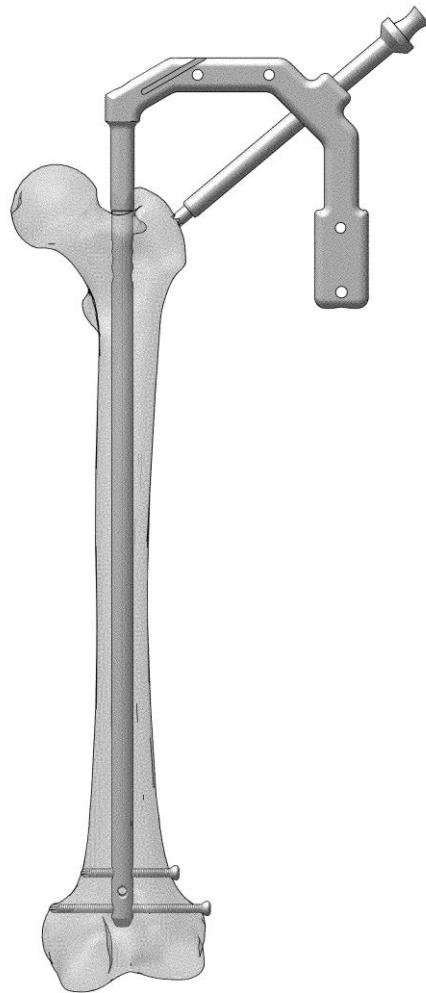

CANULA EXTERNA P/ GUIA BROCA (1440) | GUIA BROCA Ø4,3mm (1411) | BROCA Ø4,3x300mm AO | ENGATE AO (90243)  
MEDIDOR PARA PARAFUSO (1427)



## Bloqueio Proximal

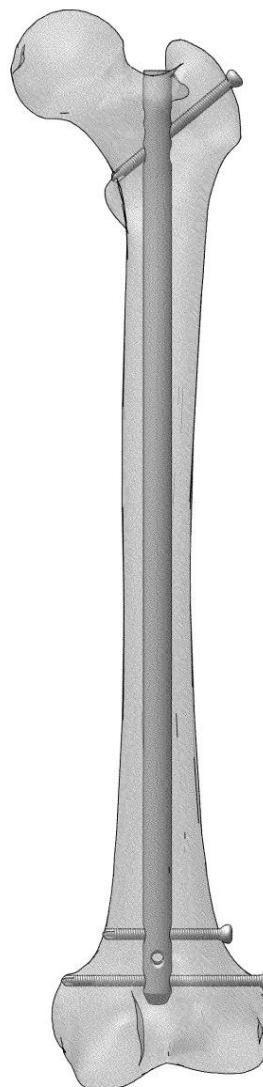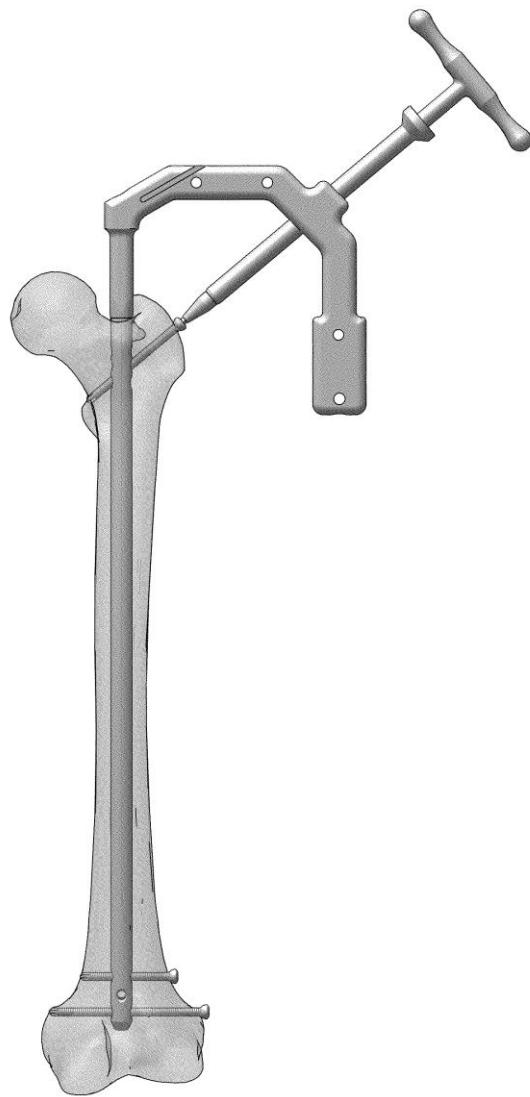

CHAVE HEXAGONAL PARA PARAFUSO Ø4,9mm (1312)